

access

Une gamme de produits **économiques**
pour une pratique dentaire **plus rentable**

GO-TWO

Conicité constante

 **Rotation** continue

Séquence endodontique NiTi

- préparation canalaire
- élargissement du couloir d'irrigation
- nettoyage du canal

CAS STANDARDS
ET/OU DIFFICILES



AVANTAGES

Efficacité :

- Très bon pouvoir coupant
- Forte conicité apicale permettant un bon nettoyage du canal
- Remontée des débris facilitée
- Bonne stabilité grâce aux multiples arêtes

Sureté des instruments :

- Avec point mousse

Simplicité :

- Séquence de base facile pour tous les canaux

Stérilisables à 134 °C

S'adapte à tous les moteurs et contre-angles endodontiques faisant de la rotation continue

GO-TWO

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 21 mm : partie travaillante 16 mm

Longueur 25 mm : partie travaillante 16 mm et 21 mm

Longueur 31 mm : partie travaillante 21 mm



LONGUEUR DE LA PARTIE TRAVAILLANTE : 16 mm					
CONICITÉ	ISO	SPEED	TORQUE	21 mm	25 mm
Assorties	N°10-25	-	-	3137520	3137521
	N°25-40	-	-	3137522	3137523
4%	● N°10	250	1.2	3137525	3137526
	● N°35	250	1.2	3137527	3137528
	● N°40	250	2	3137529	3137530
5%	○ N°15	250	1.2	3137531	3137532
	● N°30	250	1.2	3137533	3137534
6%	● N°20	250	2	3137535	3137536
	● N°25	250	2	3137537	3137538
	● N°30	250	1.5	3137539	3137540
	● N°35	250	1.5	3137541	3137542
	● N°40	250	2	-	3137543
7%	● N°25	250	2	3137544	3137545

LONGUEUR DE LA PARTIE TRAVAILLANTE : 21 mm					
CONICITÉ	ISO	SPEED	TORQUE	25 mm	31 mm
Assorties	N°10-25	-	-	3137524	-
4%	● N°10	250	1.2	3137546	3137547
	● N°35	250	1.2	-	3137548
	● N°40	250	2	-	3137549
5%	○ N°15	250	1.2	3137550	3137551
	● N°30	250	1.2	-	3137552
6%	● N°20	250	2	3137553	3137554
	● N°25	250	2	3137555	3137556
	● N°30	250	1.5	-	3137557
	● N°35	250	1.5	-	3137558
	● N°40	250	2	-	3137559

Boîte de 6 instruments par référence

PROTOCOLE

SÉQUENCE DE BASE

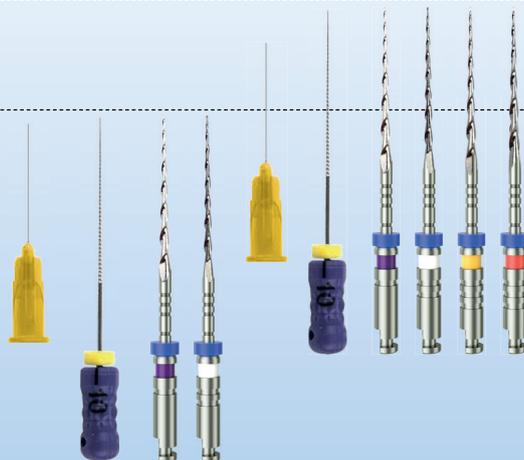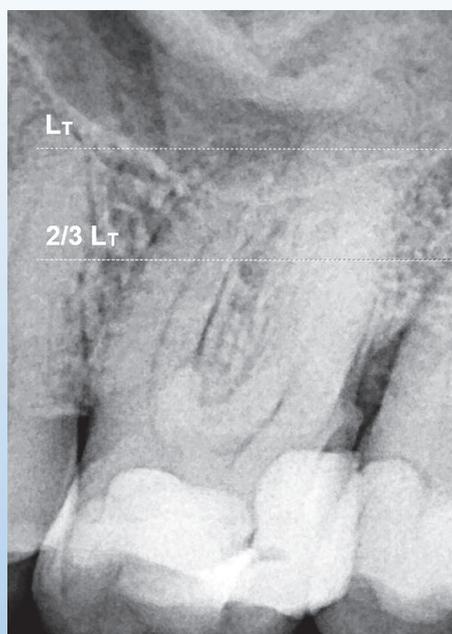

Séquence de base :

10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06

Élargissement apical :

30/.05 - 35/.04 - 40/.04

Retraitement :

15/.05 - 25/.06 - 25/.07