

access

Inserts endo

Inserts ultra-sonores

Compatibles Satelec®, EMS®, NSK®,...

Pour la localisation, le retrait
et la préparation
CANALAIRES

Testez nos inserts endo
Simplifiez VOTRE PROTOCOLE ENDO !

KIT ENDO INSERT




Compatible Satelec® KIT INSERTS ENDO : 3152839

Compatible EMS® KIT INSERTS ENDO : 3152840

**OPTIMISEZ VOS RETRAITEMENT CANALAIRE :
ÉLIMINE AUSSI LES OBSTACLES (TENONS, VIS,
RÉSIDU DE CIMENT) MAIS ÉGALEMENT LES
INSTRUMENTS FRACTURÉS !)**



1

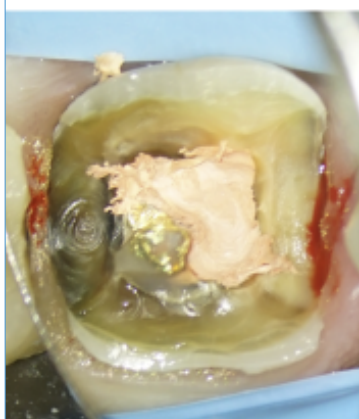

2




Compatible Satelec® ED18 : 3152839

Compatible EMS® E18 : 3152840

Autres références disponibles sur notre site/catalogue !

Inserts endo

Tous nos inserts et leur utilisation !

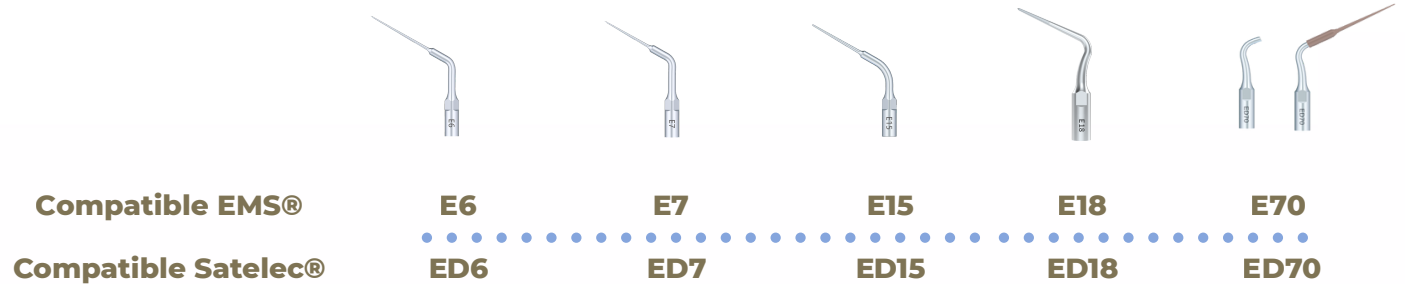

E6/ED6

Insert long et fin, permettant de travailler dans les portions les plus apicales du canal. Il est notamment utilisé pour déposer les bris d'instrument et résidus de gutta présent dans le canal.



E7/ED7

Insert fin, permettant de travailler dans les portions coronaires du canal. Il est notamment utilisé pour déposer les bris d'instrument et résidus de gutta présent dans le canal.



E15/ED15

Insert court et actif, permettant de corriger la cavité d'accès et de nettoyer les isthmes existants entre les canaux. Il est également indispensable lors de la recherche des entrées canalaire calcifiées et la suppression des pulpolithes.



E18/ED18

Insert multi-lames à pointe actif permettant de réaliser et de finir la cavité d'accès. Il permet également l'élimination des pulpolithes, de colle ou de ciment présent dans la chambre pulpaire et des ancrages radiculaires.



E70/ED70

Insert servant de base pour les embouts d'activation des irrigants canalaire (E70 et ED70).


access
UNE GAMME COMPLETE



KIT ENDO INSERT



ACTIVATOR

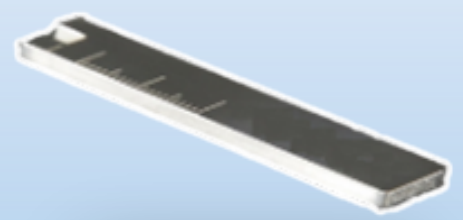

KEY ENDO INSERTS