

access

STERILE R

GO-TWO

Rotation continue



250 rpm


Alliage NiTi

pour une **mémoire contrôlée** qui évite
la création de marche d'escalier et perforations

Testez GO-TWO



Optimisez LA REMONTÉE DES DÉBRIS !

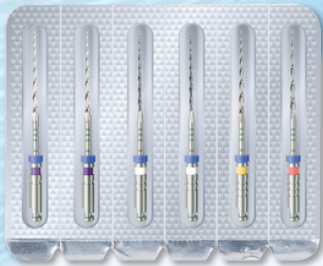


Conicité constante


CAS STANDARDS
ET/OU DIFFICILES



PROTOCOLE

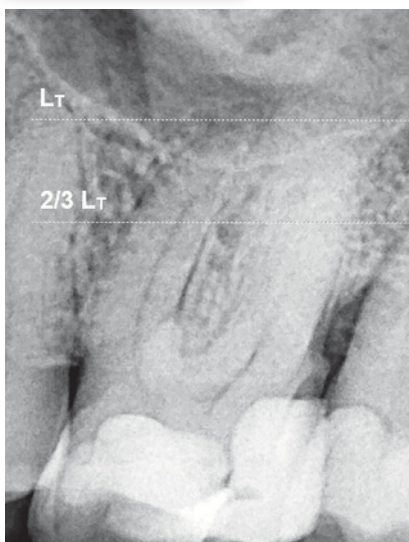

SÉQUENCE DE BASE

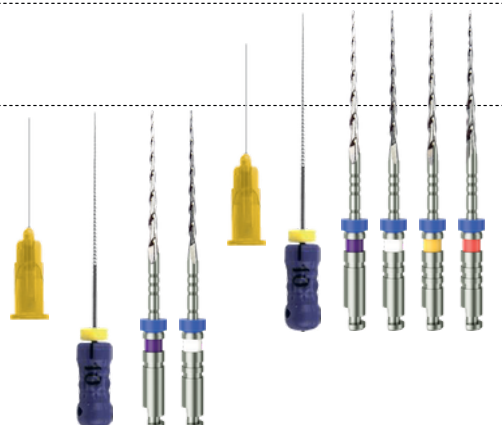

Séquence de base :

10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06

Elargissement apical :

30/.05 - 35/.04 - 40/.04

Retraitement :

15/.05 - 25/.06 - 25/.07


GO-TWO

CARACTÉRISTIQUES


Longueur 21 mm : partie travaillante 16 mm

Longueur 25 mm : partie travaillante 16 mm et 21 mm

Longueur 31 mm : partie travaillante 21 mm

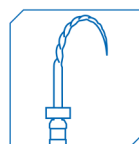

Flexibilité

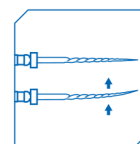Pouvoir
de coupe

Résistance

Usage
unique

x6

LONGUEUR DE LA PARTIE TRAVAILLANTE : 16 mm					
CONICITÉ	ISO	SPEED	TORQUE	21 mm	25 mm
Assorties	N°10-25	-	-	3166668	3166669
	N°25-40	-	-	3166670	3166671
4%	N°10	250	12.	3166673	3166674
	N°35	250	12.	3166675	3166676
	N°40	250	2	3166666	3166677
5%	N°15	250	12.	3166678	3166679
	N°30	250	12.	3166680	3166681
6%	N°20	250	2	3166682	3166683
	N°25	250	2	3166684	3166685
	N°30	250	1.5	3166667	3166686
	N°35	250	1.5	3166687	3166688
7%	N°40	250	2	-	3166689
	N°25	250	2	3166690	3166691

LONGUEUR DE LA PARTIE TRAVAILLANTE : 21 mm					
CONICITÉ	ISO	SPEED	TORQUE	25 mm	31 mm
Assorties	N°10-25	-	-	3166672	-
4%	N°10	250	12.	3166692	3166693
	N°35	250	12.	-	3166694
	N°40	250	2	-	3166695
5%	N°15	250	12.	3166696	3166697
	N°30	250	12.	-	3166698
6%	N°20	250	2	3166699	3166700
	N°25	250	2	3166701	3166702
	N°30	250	1.5	-	3166703
	N°35	250	1.5	-	3166704
	N°40	250	2	-	3166705

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

		CANAUX STANDARDS DROITS/LARGES	CANAUX DIFFICILES FINS/COURBES
Pré-élargissement			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilité +++</i>		✓
Traitement			
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	
	REVERSO BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
Retraitement			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	